

# WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH



dostępne kolory



ciemno szary z zielonym



ciemno szary z różowym



jasno szary z zielonym



jasno szary z różowym

## ORMESA® CE

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

### NEW BUG

**Wózek inwalidzki, specjalny, multipozycyjny, bierny, spacerowy dla dzieci i dorosłych**

Dofinansowanie:

S.18.01.00 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.21.01.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci


New Bug to inwalidzki wózek **multipozycyjny** dla dzieci i dorosłych, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej. To wózek spacerowy z możliwością odwrócenia siedziska w stronę osoby prowadzącej wózek (dla rozmiaru 1-2). Przeznaczony dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo rdzeniową, chorobami mięśni. Składany jest w czworobok, ma regulowany na długość podnózek oraz możliwość zmiany szerokości i głębokości siedziska, oraz wychylenie w przestrzeni siedziska (tilt). Wózek posiada regulowane na wysokość oparcie. Oprócz dużej ilości opcji dodatkowych wózek posiada możliwość zamontowania stelaża domowego. Stelaż domowy - występuje w wersji fotelik rehabilitacyjny dla dzieci do siedzenia.

Dostępne kolory: jasno szary z zielonym, jasno szary z różowym, ciemno szary z zielonym, ciemno szary z różowym.



stelaż domowy

parametry wózka po złożeniu:

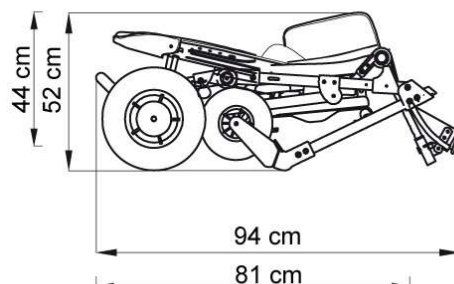

średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	30 cm pełne

kółka pneumatyczne - opcja

roz.	wysokość oparcia	szerokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka	maks. waga dziecka	kąt nachylenia oparcia względem siedziska
1-2	52-62 cm	37 cm	20-30 cm	20-30 cm	57 cm	100-110 cm	67-96 cm	18 kg	35 kg	90°-125°
3-4	60-75 cm	46 cm	30-40 cm	25-36 cm	62 cm	112-127 cm	80-107 cm	23,7 kg	45 kg	90°-130°

### AKCESORIA DO NEW BUG



**817 pas  
odwodzący**



**818 śpiwór**



**824 stolik**



**825 ostona  
przeciwdeszczowa**



**827 mocowanie  
stóp**



**pas piersiowy**



**834 regulowany  
tapicerowany klin**



**838 podpory  
boczne**



**839 przednia  
rączka**




**852 zagłówek**



**853 kamizelka  
pełna**



**858 koszyk  
tekstylny**

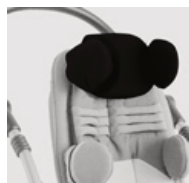

**863 zagłówek z  
regulacją kąta**



**868 obejma  
piersiowa**



**891 mocowanie do  
transportu**



**894 pas biodrowy**



**903 kamizelka 5-  
punktowa**



**905 hamulec  
ręczny**



**906 pas 5-  
punktowy**



**921 podpórka dla  
drugiego dziecka**



**922 uchwyt na  
butelkę**



**824B plastikowy  
stolik**



**920 pas  
4-punktowy**



**819 daszek**



**854 parasolka**



**935 uchwyt na  
butlę z tlenem**



**892 tapicerowana  
nakładka na podnóżek**



**942 ergonomiczny  
zagłówek**



**834R regulowany na  
głębokość klin**