

# WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



# NOVUS

# ORMESA®

## NOVUS

**Wózek inwalidzki, specjalny, spacerowy**

Dofinansowanie:


P.130B.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni. Możliwa jest stopniowa regulacja oparcia i siedziska, podnózek regulowany jest na wysokość. Koła mocowane są w systemie szybkozłącza, co umożliwia łatwy transport wózka. Szeroki wybór akcesoriów.



długość wózka po złożeniu:

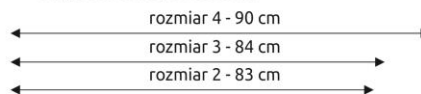

średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	30 cm pneumatyczne

	szerokość siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	odległość między siedziskiem a podnóżkiem	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka z kołami	maks. waga dziecka	kąt nachylenia oparcia względem siedziska
2	30 cm	65-71 cm	30 cm	27-37 cm	60 cm	100 cm	87 cm	19,5 kg	50 kg	90°-110°
3	35 cm	67-73 cm	35 cm	29-41 cm	63 cm	100 cm	96 cm	20,9 kg	60 kg	90°-110°
4	38 cm	72-78 cm	39 cm	35-45 cm	66 cm	112 cm	96 cm	22,1 kg	70 kg	90°-110°