
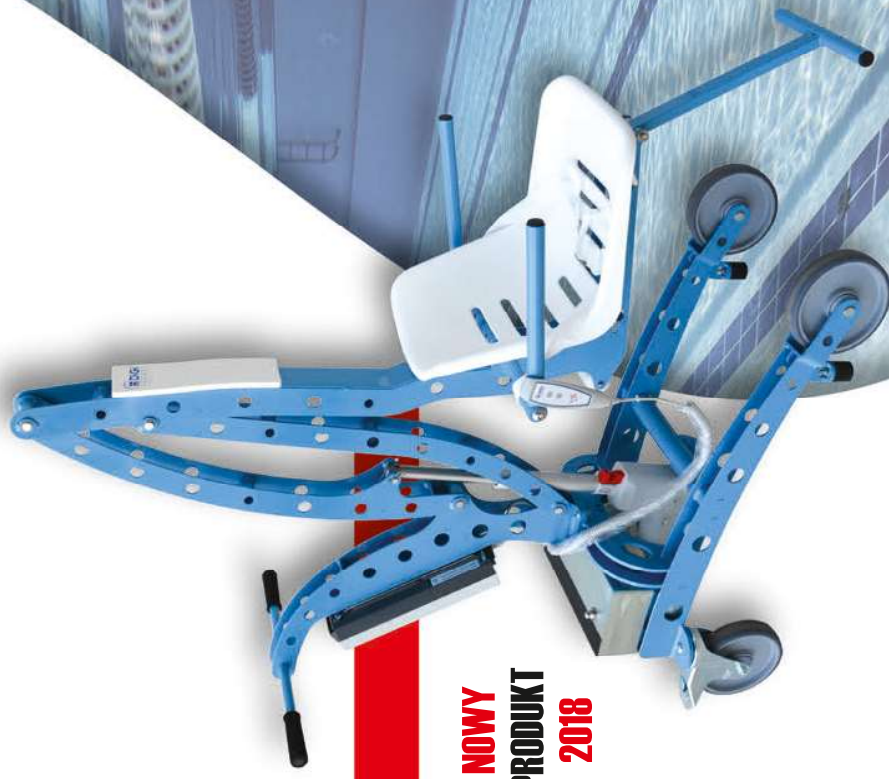


nDiGi

PROJECT

PARAMETRY TECHNICZNE (podane w mm)

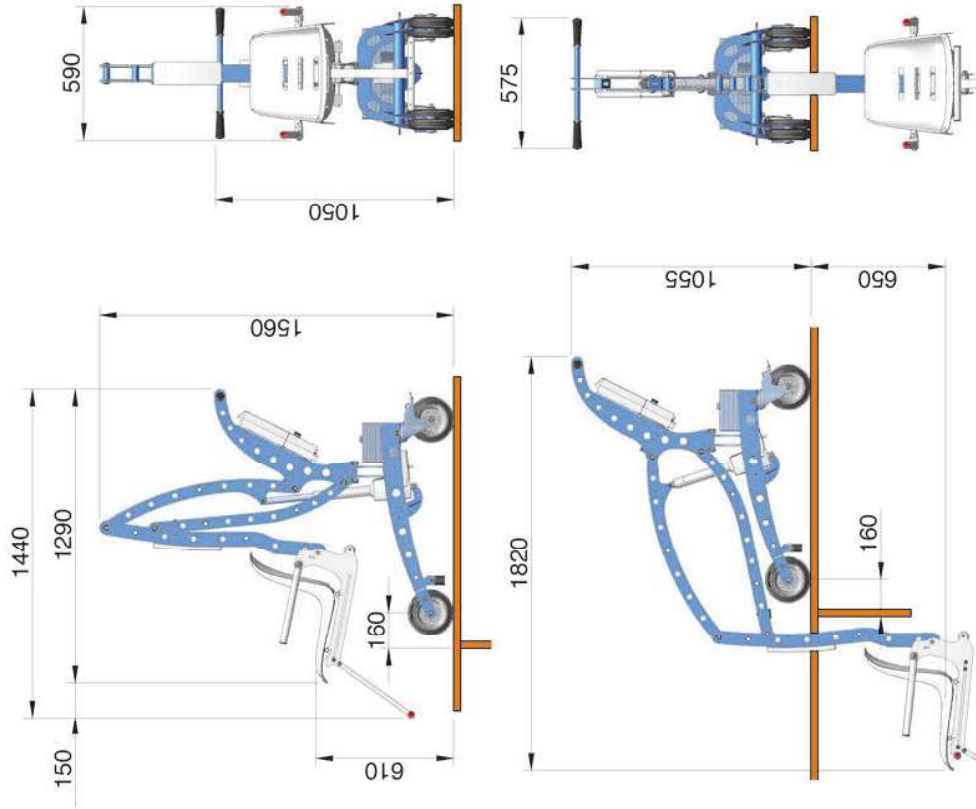

**NOWY
PRODUKT
2018**

ecopass



Mobilex Sp. z o.o.
ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź

tel. 42 214 29 11, fax 42 214 14 05,
info@mobilex.pl, <http://www.mobilex.pl>

www.mobilex.pl



NOWY PRODUKT 2018

ECOPOOL - to najnowszy projekt firmy DiGi Projekt, która specjalizuje się w produkcji podnośników basenowych.

ECOPOOL - to prosta i ekonomiczna wersja podnośnika basenowego, który przede wszystkim ma być:
- funkcjonalny - spełniać swoje zadanie
- bezpieczny - za sensowną cenę



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- maksymalne obciążenie: 136 kg
- maksymalny zasięg ramienia: 1260 mm
- głębokość siedziska w wodzie: 650 mm
- czas opuszczania do wody z osobą: 20 sekund
- czas podniesienia z wody z osobą: 25 sekund
- całkowita waga urządzenia: 135 kg
- bateria: 24 V
- moc: 24 V

Podnośnik basenowy **EcoPool** to ekonomiczna i prosta wersja innych podnośników basenowych znanego producenta firmy DiGi Project. Jest to firma specjalizująca się w tego typu produktach i z pewnością można im zaufać szczególnie jeśli chodzi o najważniejsze funkcje jakie powinien spełniać tego typu produkt. Ma on służyć likwidacji barier architektonicznych jakimi jest np: brzeg basenu. Często zejście do basenu i wyjście z niego jest barierą nie do pokonania nie tylko dla osób niepełnosprawnych ale i starszych. Podnośnik ten jest urządzeniem, dzięki któremu z łatwością można przetransportować użytkownika do basenu i z basenu jak pod prysznic czy do szatni basenowej w łatwy i komfortowy sposób. Użytkownik po prostu siada na urządzeniu, które jest doprowadzane do krawędzi basenu a następnie siedzisko jest stopniowo opuszczane poniżej powierzchni wody. Przy wychodzeniu z wody proces przebiega po prostu w odwrotną stronę.

OPCJE

- 4 punktowa kamizelka
- 5 punktowa kamizelka
- pokrowiec