


# PODNOŚNIKI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

## PODNOŚNIKI BASENOWE

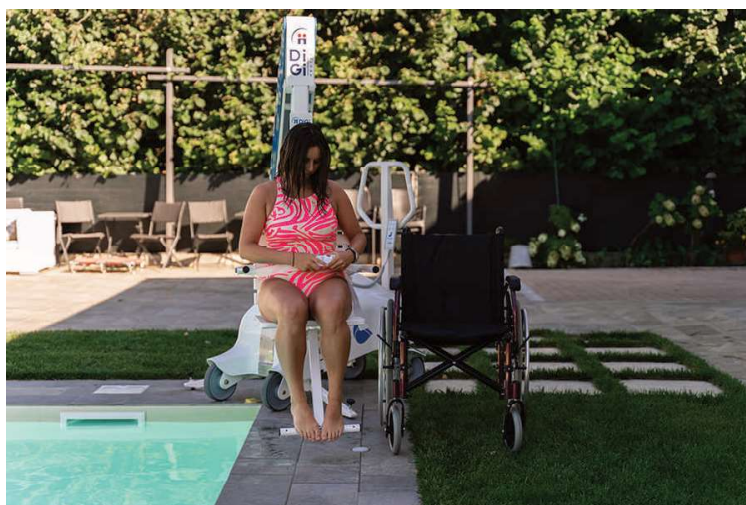

## PODNOŚNIK BASENOWY PELICAN POOL

PELICAN POOL to najnowsza propozycja firmy DiGi Project gwarantująca osobom z niepełnosprawnością lub osobom starszym wejście i wyjście z basenu. Dzięki swoim zaawansowanym właściwości technicznym pozwala na likwidację bariery architektonicznej przy lustrze wody w postaci murku o maksymalnej wysokości 50 cm. Podnośnik został zaprojektowany z myślą o umożliwieniu użytkownikowi samodzielności w jego obsłudze bez konieczności asysty osoby towarzyszącej polegającej na bezpiecznym wchodzeniu i wychodzeniu z wody. Pozwala na to nowatorskie rozwiązanie umożliwiające obracanie ramienia podnośnika z siedziskiem pod kątem 90° w prawo lub lewo oraz opuszczanie i podnoszenie ramienia do i z wody. Wszystko to odbywa się z pozycji osoby siedzącej na krzeselku podnośnika i sterowane jest elektronicznie za pomocą pilota.

Właściwości techniczne podnośnika basenowego PELICAN POOL:

- 4 przyciskowy panel sterowania (góra – dół, obrót prawo – lewo)
- Przycisk bezpieczeństwa umożliwiający natychmiastowe unieruchomienie urządzenia
- 50 cykli pracy na jednym naładowaniu baterii
- Rama ze stali nierdzewnej malowana proszkowo
- Koła o średnicy 200 mm (tylne koła obracane)
- Hamulec postojowy na kołach tylnych
- Boczne stabilizatory poprawiające bezpieczeństwo pracy z podnośnikiem
- 2 punktowy pas bezpieczeństwa w standardzie
- Zagłówek w standardzie

### PARAMETRY TECHNICZNE

maksymalne obciążenie	140 kg
głębokość zanurzenia siedziska pod wodą	82 cm
czas opuszczania do wody z osobą	25 sekund
czas podnoszenia z wody z osobą	20 sekund
całkowita waga urządzenia	340 kg
bateria	2 x 12 V

